

## СЕРИЯ NTHM

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ, МЕДИКАМЕНТОВ и ЛЕЧЕНИЯ

ТЕЛЕЖКА, ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ / ХРАНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

Корзина



NTHM 112 - NTHM 113 - NTHM 115- NTHM 116

**1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ**

Авторизованная ссылка: [info@nitrocare.com](mailto:info@nitrocare.com)

**А) КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

: Gökler Mobilya Medikal ve Sağlık Hizmetleri

**Б) ТОРГОВАЯ МАРКА**

A.Ş. : НИТРООЧИСТИТЕЛЬ

**В) АДРЕС**

: Organize Sanayi Bölgesi 1. cad. No:7

**Г) НОМЕР ТЕЛЕФОНА**

Merkez / SİVAS : 0 346 218 19 10-13

**Е) ФАКС**

: 0 346 218 19 14

**Ф) Электронная ПОЧТА**

: [info@nitrocare.com.tr](mailto:info@nitrocare.com.tr)

**Г) ТИП**

: Больничная мебель и оборудование

**Н) МОДЕЛЬ I) СРОК СЛУЖБЫ**

медицинского назначения : NTHM 113

**J) СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО**

: 10 лет

**ОБСЛУЖИВАНИЯ**

: Gökler Furniture Medical and Health Services Inc

Модели NITRO NTHM разработаны с учетом максимальной безопасности и мобильности. Они разработаны с учетом физических недостатков и комфорта для пациентов с высоким риском.

Данное руководство пользователя необходимо внимательно прочитать, чтобы избежать повреждений, связанных с потребителем, и добиться наилучших характеристик изделия.

## Указатель

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ НТНМ 112                      | 4  |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ НТНМ                        | 5  |
| 3. 112 СПЕЦИФИКАЦИЯ НТНМ 112 ОБЩАЯ                | 6  |
| 4. ИНФОРМАЦИЯ НТНМ 113                            | 8  |
| 5. НТНМ 113                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ | 9  |
| 5. НТНМ 113                    СПЕЦИФИКАЦИЯ       | 9  |
| 6. НТНМ 115 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                      | 11 |
| 7. НТНМ 115 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ                | 12 |
| 8. НТНМ 116 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                      | 13 |
| 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НТНМ 116                | 14 |
| 10.     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ         | 15 |
| 10.1     Ежемесячное Техническое Обслуживание     | 15 |
| 10.2 Техническое обслуживание при                 | 15 |
| каждом 4-м монтаже 10.3. Ежегодное техническое    | 15 |
| обслуживание 10.4 Отдельная деталь                | 15 |
| Коррозия 10.5                                     | 15 |
| 10.6 Колесики                                     | 15 |
| 10.6 Принадлежности                               | 15 |
| 11.     Утилизация                                | 17 |
| 11.1 Защита окружающей среды                      | 17 |
| 12.     Гарантия                                  | 17 |
| 13.     Контакты                                  | 18 |

## АВАРИЙНАЯ ТЕЛЕЖКА NTHM 112

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ ТЕЛЕЖКИ

Тележки для лекарств и неотложной помощи NITROCARE выходят на первый план благодаря удобной и прочной конструкции. Верхняя поверхность тележки для лекарств и неотложной помощи изготовлена из АБС-пластика толщиной 6 мм. материал.

Материал шасси и корпуса тележки для лекарств и неотложной помощи изготовлен из компактной нержавеющей стали.

Тележка для лекарств и неотложной помощи имеет 5 выдвижных ящиков разных размеров. Пользователь может использовать отделения для разделения этих ящиков на 3-4-5-6-7-8-9 и 12 с помощью фактора

Между медицинской тележкой и тележкой скорой помощи установлены 4 двойных колеса, и тележка блокируется с помощью обоих этих колесиков для обеспечения более удобного и безопасного использования пользователем. В верхней части нашего изделия имеются ящики для хранения антибактериальных препаратов, подходящие для

в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения В задней части упаковки с лекарствами и процедурами имеется реанимационный столик

Автомобиль. Если поставщику медицинских услуг необходимо вмешаться в данный случай в экстренной ситуации, извлеките лоток из гнезда, наденьте его на пациента и произведите необходимое вмешательство на пациенте. С правой стороны тележки для медикаментов и процедур имеется регулируемая по высоте подставка для капельницы



. Пользователь может создать комфортные условия для себя и пациента с помощью регулировки высоты. Флакон с полкой расположен с левой стороны от машины для приема лекарств и оказания неотложной помощи.

Его можно использовать для установки.

Столик-дефлятор в верхней части машины для приема лекарств и лечения обеспечивает более комфортные условия для пользователя. Пользователь может отрегулировать дефляторную пластину на 360 градусов и обеспечить ее оптимальное использование. Транспортное средство для приема лекарств и лечения называется транспортным средством для оказания неотложной помощи.

и была разработана система блокировки всех глаз, чтобы их можно было открыть, когда возникает чрезвычайная ситуация. Лекарства и т.д. готовы к этому моменту. Транспортировка материалов будет невозможна без открытия системы замков. Встроенная тормозная система сбоку от тележки для экстренной помощи позволяет закрыть все ящики.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 112

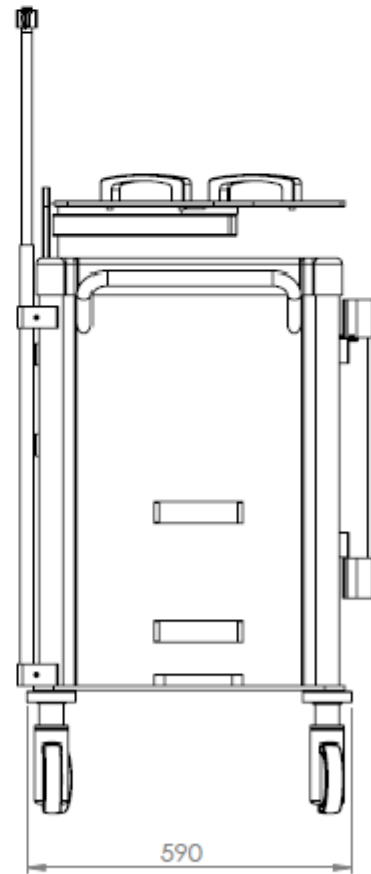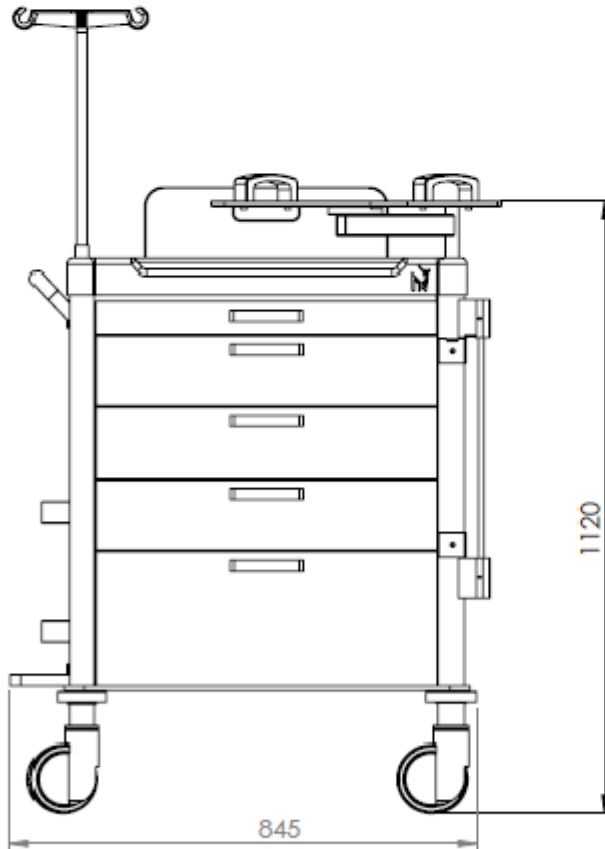


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| DRAVER    | РАЗМЕРЫ            |
|-----------|--------------------|
| 1.ДРАВЕР: | 540 x 340 x 50 мм  |
| 2.ДРАВЕР: | 540 x 340 x 100 мм |
| 3.ДРАВЕР: | 540 x 340 x 100 мм |
| 4.ДРАВЕР: | 540 x 340 x 100 мм |
| 5.ДРАВЕР: | 540 x 340 x 190 мм |

НЕТ

Пользователь может использовать перегородки, чтобы разделить эти ящики на 3-4-5-6-7-8-9 и 12 с помощью коэффициента

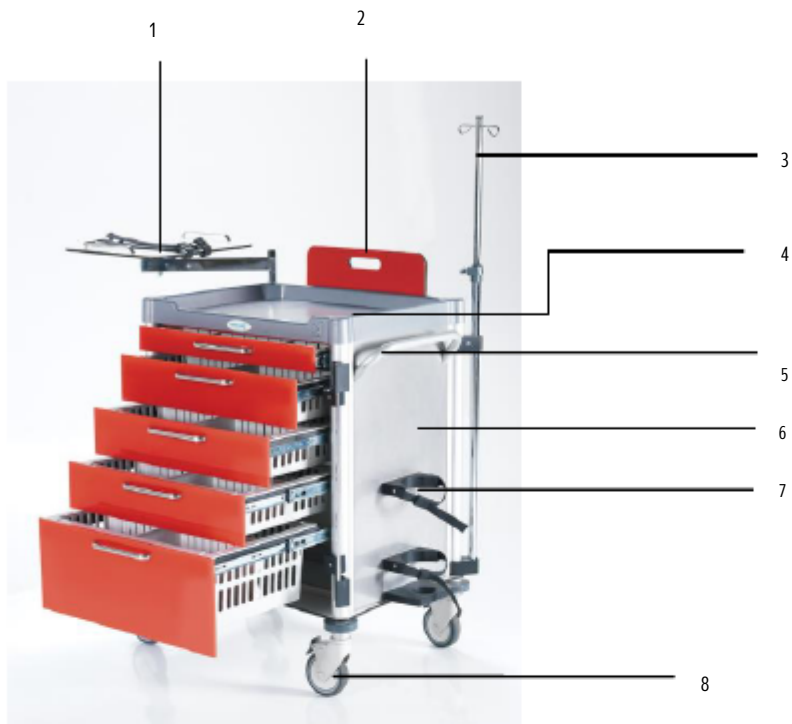

1 - Стол для дефибратора размером 420 x 420 мм

2 - Реанимационная доска размером 650 x 430 мм

3 - Фиксированная деталь 25 x 1,5 мм, регулируемая деталь 20 x 1,5 мм, кромкооблицовочный стержень для IV-го типа

4 - Столешница из АБС-пластика 720 x 550 мм

5 - Нажимной держатель

6 - Максимальное отверстие для подачи кислорода объемом 5 литров сбоку, изготовленное из АБС-пластика

7 - Передние ящики из оргстекла


8 - Первый ящик можно использовать как рабочий стол.

### 113 ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ ЛЕКАРСТВ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ



1. Ролики 125 мм
2. Мусорный бак
3. Полка для раздачи бутылок
4. Хранение лекарств
5. Столешница из АБС-пластика
6. Защитный Бампер
7. Тормозная Система

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 113

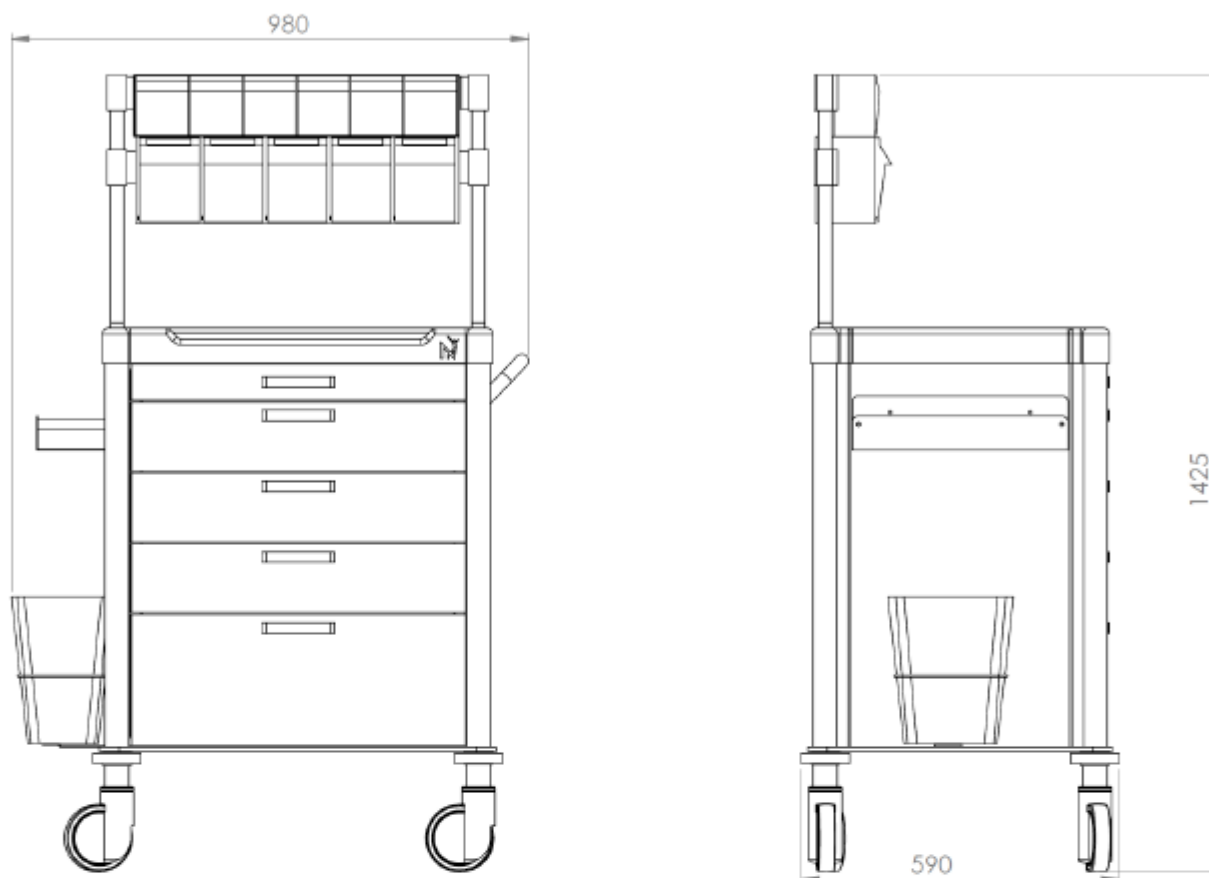

Тележки для медикаментов и неотложной помощи NITROCARE выходят на передний план благодаря удобной и надежной конструкции а) Верхняя поверхность тележки для медикаментов и неотложной помощи изготовлена из АБС-пластика толщиной 6 мм. компактный материал. Компактный материал - это вода, кислота и т.д. Максимальная прочность по отношению к материалам и удобство использования практикующим врачом. б) Шасси и материал корпуса тележки для медикаментов и неотложной помощи изготовлены из нержавеющей стали

Тележка для медикаментов и неотложной помощи имеет 5 выдвижных ящиков разного размера. Пользователь может использовать перегородки, чтобы разделить эти ящики на 3-4-5-6-7-8-9 и 12 с помощью коэффициента с) Между медицинской тележкой и тележкой скорой помощи установлены 4 двойных колеса, и машина фиксируется с помощью обоих этих колесиков для обеспечения более удобного и безопасного использования пользователем. г) В верхней части нашего изделия, имеются ящики для хранения антибактериальных препаратов, подходящие в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения

- е) Флакон с полкой, расположенный с левой стороны автомобиля пользователя с лекарствами и неотложной помощью. Это может использоваться для настройки.
- ф) Мешок для мусора рядом с машиной для приема лекарств и оказания неотложной помощи обеспечивает удобство для пользователя.
- г) Встроенная тормозная система сбоку от тележки для оказания неотложной помощи позволяет закрыть все ящики.



## СИМВОЛЫ




Пожалуйста, прочтите руководство пользователя...

## НТНМ 115 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- 1- Мусорное ведро
- 2- Полка для раздачи бутылок
- 3- Хранение лекарств в 12 коробках
- 4- Столешница из АБС-пластика
- 5- Система определения  
местоположения Аварийной тележки
- 6- Тормозная  
система
- 7- Ролики -125 мм
- 8- Защитный Бампер

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 115

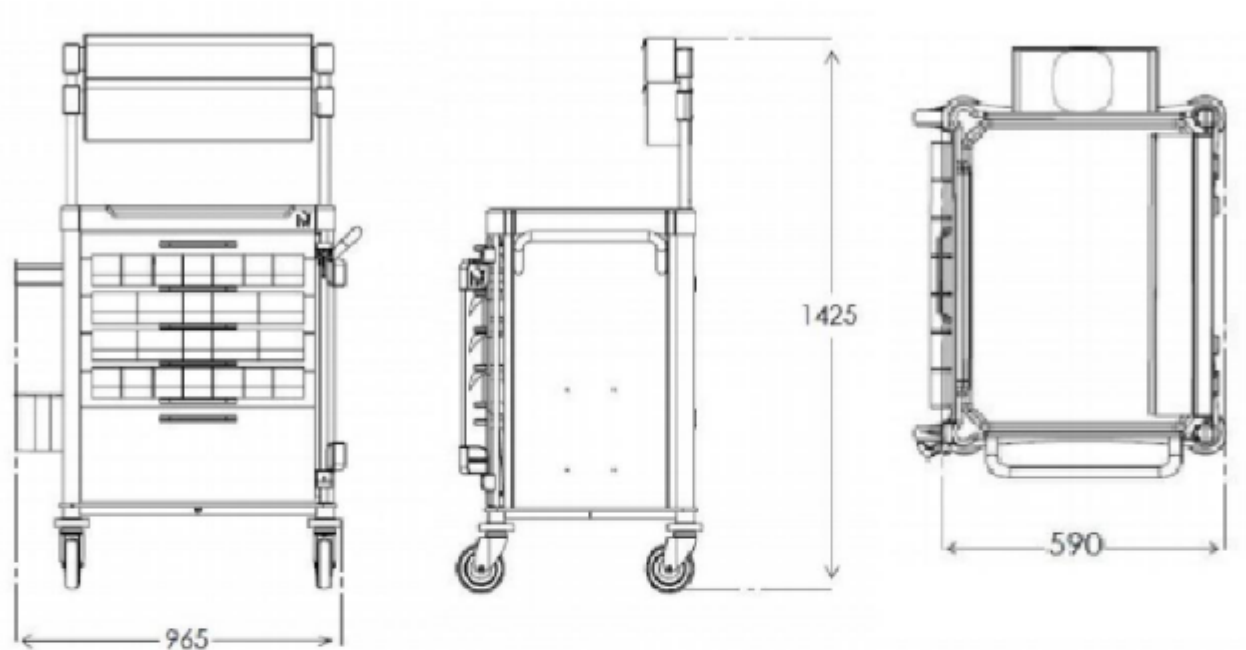

Верхняя поверхность тележки для медикаментов и неотложной помощи изготовлена из АБС-пластика толщиной 6 мм.

компактный материал. Компактным материалом является вода, кислота и т.д.

Максимальная прочность по отношению к материалам и удобство использования

практикующим врачом. Система блокировки тележки может блокировать все

выдвижные ящики. 6. Выдвижной ящик может быть разделен на секции с помощью специального

устройства. Верхний приставной столик изготовлен из МДФ и Абс-пластика.

6 драверов (1. Дравер можно использовать в качестве рабочего стола. ) доступно 7 штук

в упаковках № 2 и 5 и 5 штук в упаковках № 3 и 4 устройств для хранения лекарств

каждое из этих устройств состоит из 4 отдельных секций.

Открытая полка для бутылок с эдидином с одной стороны, два ряда-ящики для хранения лекарств ага

доступны сверху, защитные бортики на колесиках для предотвращения ударов. 3

линии- за таблицей доступны ящики для хранения лекарств.

Защитные бортики на колесиках.

В задней части тележки для медикаментов имеются 3 направляющих.

125 мм 4 колесика

Мусорный бак

Тормозная система на двух колесиках с помощью ножки.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРЗИНЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВ NTHM 116  
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



1- Двойные ролики диаметром 100 мм

2- Пищевое тело


3- Столешница из АБС-пластика

4- Система Определения

местоположения Аварийной тележки 5- Защитный

Бампер 6- Тормозная Система

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 116

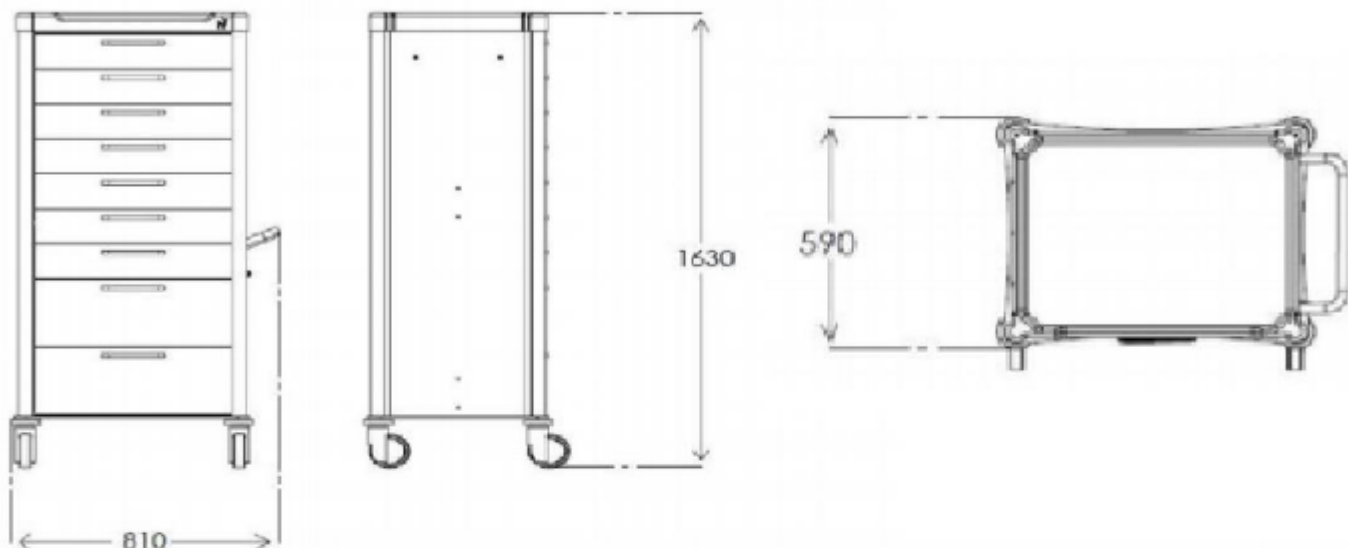

Конструкция корпуса изготовлена из нержавеющей стали, пластика и алюминия.

Доступна система блокировки тележки; все тележки могут запираться с помощью замка механизма.

Тележки высотой 100-200 мм могут быть разделены на 3-4-5-6-7-8-9-12 различных секций

Верхний боковой столик изготовлен из МДФ и АБС-материалов.

9 выдвижных ящиков. Верхние 7 выдвижных ящиков могут быть разделены на 3-4-5-6-7-8-9-12 различных секций. 8 и 9 тягачи имеют 4 секции.

Защитные бамперы на колесиках.

Тормозная система на двух колесиках с помощью ножки.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Периоды технического обслуживания

### 6.1. Ежемесячное техническое обслуживание

Проверяйте все подвижные части на предмет коррозии.

### 6.2. Техническое обслуживание каждые 4

месяца Управляйте приводами Контролируйте

все резьбовые соединения

Управляйте подвижным механизмом кровати пациента.

Отрегулируйте винты на колесиках и при необходимости

затяните винты. 6.3. Техническое обслуживание каждые 12 месяцев

Общий контроль механических систем перемещения и пластиковых принадлежностей медицинских тележек.

### 6.4. Запасные части

Гарантия не распространяется на запасные части, требующиеся в связи с неправильным использованием.

Техническое обслуживание должно производиться только уполномоченным и обученным лицом. О любых проблемах сообщайте в техническую службу NITROCARE.

## Требуются запасные части и

**информация** Техническая служба NITROCARE

teknikservis@nitrocare.com.tr

0542 845 23 05

### 6.5. Коррозия

Отрегулируйте винты на роликах и при необходимости затяните

винты. Отрегулируйте все механизмы блокировки. Замените

все изношенные принадлежности. Не используйте неподходящие

детали после замены изнашиваемых принадлежностей.

### 6.6. Ролики

Полностью очистите ролики.

Отрегулируйте соединительные винты и при необходимости замените их.

Перемещайте ролики и следите за их исправностью.

Движение вперед и назад.

Неограниченное движение. Управляйте

тормозной системой и при необходимости заменяйте ее.

## 6.7. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Проверьте принадлежности и убедитесь, что они функционируют должным образом, и при необходимости замените их.

## Утилизация

### Защита окружающей среды

Компания NITROCARE заботится об охране окружающей среды для своих потомков и добивается больших успехов в этом мнении.

Материалы этого продукта совместимы с окружающей средой. Не содержит опасных веществ.

Заказчик будет проинформирован об используемых символах и обозначениях.

При производстве используются переработанная сталь, электрические компоненты и деревянные детали. Изделия упакованы в коробки, пригодные для вторичной переработки.



## Гарантия

Компания NITROCARE несет ответственность только за регулярное техническое обслуживание и надежность изделия. **При возникновении критической непоправимой проблемы во время технического обслуживания**

Прекратите использование кровати пациента.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца с даты покупки. Дефекты, возникшие в результате изготовления и установки, будут устранены бесплатно. Дефекты, возникшие в результате неправильного использования, не покрываются гарантией. Условия использования продукта указаны в стандартах.

## Контакты

## ФАБРИКА / СИВАС

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım 5.Cadde

No:48 - 50 SİVAS-TÜRKİYE **Telefon:** +90 0 346 218

12 91 - 92 - 93 **Faks:** +90 0 346 218 12 95

**Электронная почта:** info@ofisline.com.tr

## ФАБРИКА / СИВАС

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:7

SİVAS-TÜRKİYE **Telefon:** +90 346 218 19 10 -

11 - 12 - 13 **Faks:** +90 346 218 19 14

**Электронная почта:** info@nitrocare.com.tr

## ГРИБЫ / АНКАРА

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.1436 sok

No:1-37 Çukurambar/ANKARA-TÜRKİYE **Telefon:**+90

312 286 66 44 **Faks:**+90 312 286 86 67

**Электронная почта:**info@nitrocare.com.tr

## İSTANBUL OFFICE / İSTANBUL

Barbaros Mah. Halk Cad No:15-17

Ataşehir-İSTANBUL TÜRKİYE **Telefon:**+90 216

317 56 50-51 **Faks:**+90 216 317 56 62

**Электронная почта:**info@nitrocare.com.tr

## ГРИБЫ / ИЗМИР

9 Eylül Mah. Akçay Cad.No:159 Gaziemir

İZMİR-TÜRKİYE **Telefon:**+90 232 220 13 14

**Faks:**+90 232 220 13 15

**Электронная почта:**info@nitrocare.com .tp

