

СЕРИЯ NTHM

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ, МЕДИКАМЕНТОВ и ЛЕЧЕНИЯ

ТЕЛЕЖКА, ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ / ХРАНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

Корзина



NTHM 112 - NTHM 113 - NTHM 115- NTHM 116

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Авторизованная ссылка: info@nitrocare.com

А) КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

: Gökler Mobilya Medikal ve Sağlık Hizmetleri

Б) ТОРГОВАЯ МАРКА

A.Ş. : НИТРООЧИСТИТЕЛЬ

В) АДРЕС

: Organize Sanayi Bölgesi 1. cad. No:7

Г) НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Merkez / SİVAS : 0 346 218 19 10-13

Е) ФАКС

: 0 346 218 19 14

Ф) Электронная ПОЧТА

: info@nitrocare.com.tr

Г) ТИП

: Больничная мебель и оборудование

Н) МОДЕЛЬ I) СРОК СЛУЖБЫ

медицинского назначения : NTHM 113

J) СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

: 10 лет

ОБСЛУЖИВАНИЯ

: Gökler Furniture Medical and Health Services Inc

Модели NITRO NTHM разработаны с учетом максимальной безопасности и мобильности. Они разработаны с учетом физических недостатков и комфорта для пациентов с высоким риском.

Данное руководство пользователя необходимо внимательно прочитать, чтобы избежать повреждений, связанных с потребителем, и добиться наилучших характеристик изделия.

Указатель

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ НТНМ 112	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ НТНМ	5
3. 112 СПЕЦИФИКАЦИЯ НТНМ 112 ОБЩАЯ	6
4. ИНФОРМАЦИЯ НТНМ 113	8
5. НТНМ 113 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	9
5. НТНМ 113 СПЕЦИФИКАЦИЯ	9
6. НТНМ 115 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	11
7. НТНМ 115 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12
8. НТНМ 116 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	13
9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НТНМ 116	14
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	15
10.1 Ежемесячное Техническое Обслуживание	15
10.2 Техническое обслуживание при	15
каждом 4-м монтаже 10.3. Ежегодное техническое	15
обслуживание 10.4 Отдельная деталь	15
Коррозия 10.5	15
10.6 Колесики	15
10.6 Принадлежности	15
11. Утилизация	17
11.1 Защита окружающей среды	17
12. Гарантия	17
13. Контакты	18

АВАРИЙНАЯ ТЕЛЕЖКА NTHM 112

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ ТЕЛЕЖКИ

Тележки для лекарств и неотложной помощи NITROCARE выходят на первый план благодаря удобной и прочной конструкции. Верхняя поверхность тележки для лекарств и неотложной помощи изготовлена из АБС-пластика толщиной 6 мм. материал.

Материал шасси и корпуса тележки для лекарств и неотложной помощи изготовлен из компактной нержавеющей стали.

Тележка для лекарств и неотложной помощи имеет 5 выдвижных ящиков разных размеров. Пользователь может использовать отделения для разделения этих ящиков на 3-4-5-6-7-8-9 и 12 с помощью фактора

Между медицинской тележкой и тележкой скорой помощи установлены 4 двойных колеса, и тележка блокируется с помощью обоих этих колесиков для обеспечения более удобного и безопасного использования пользователем. В верхней части нашего изделия имеются ящики для хранения антибактериальных препаратов, подходящие для

в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения В задней части упаковки с лекарствами и процедурами имеется реанимационный столик

Автомобиль. Если поставщику медицинских услуг необходимо вмешаться в данный случай в экстренной ситуации, извлеките лоток из гнезда, наденьте его на пациента и произведите необходимое вмешательство на пациенте. С правой стороны тележки для медикаментов и процедур имеется регулируемая по высоте подставка для капельницы



. Пользователь может создать комфортные условия для себя и пациента с помощью регулировки высоты. Флакон с полкой расположен с левой стороны от машины для приема лекарств и оказания неотложной помощи.

Его можно использовать для установки.

Столик-дефлятор в верхней части машины для приема лекарств и лечения обеспечивает более комфортные условия для пользователя. Пользователь может отрегулировать дефляторную пластину на 360 градусов и обеспечить ее оптимальное использование. Транспортное средство для приема лекарств и лечения называется транспортным средством для оказания неотложной помощи.

и была разработана система блокировки всех глаз, чтобы их можно было открыть, когда возникает чрезвычайная ситуация. Лекарства и т.д. готовы к этому моменту. Транспортировка материалов будет невозможна без открытия системы замков. Встроенная тормозная система сбоку от тележки для экстренной помощи позволяет закрыть все ящики.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 112

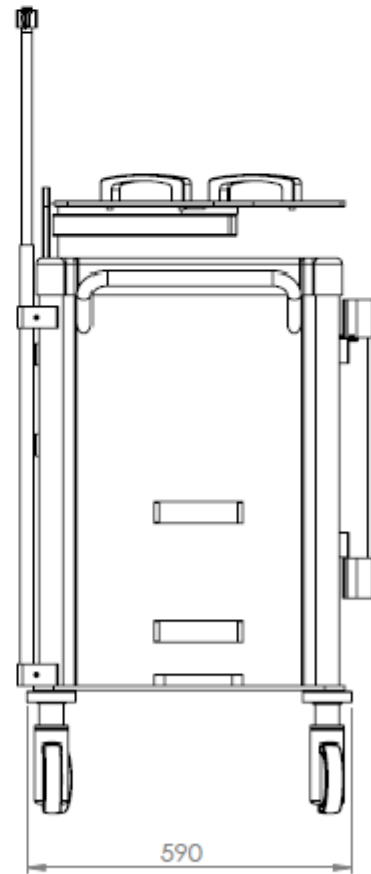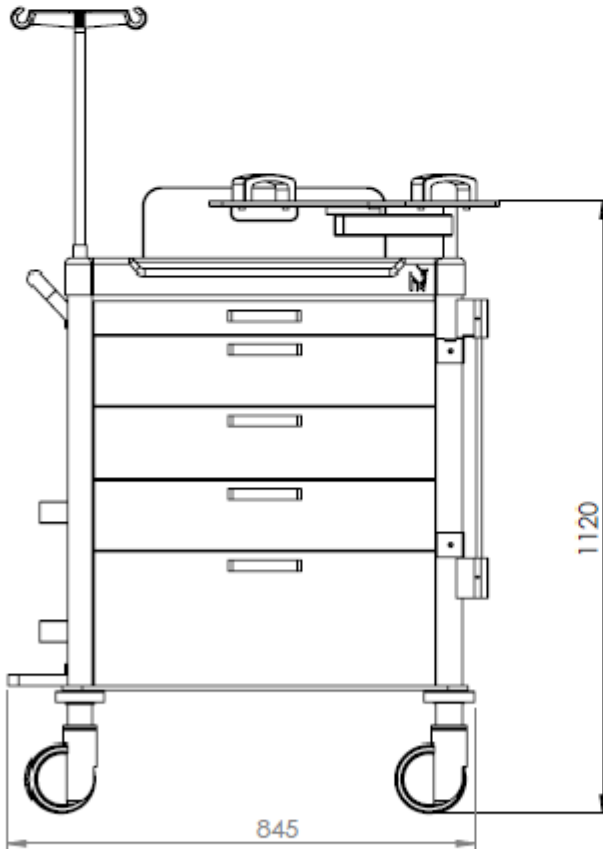


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DRAVER	РАЗМЕРЫ
1.ДРАВЕР:	540 x 340 x 50 мм
2.ДРАВЕР:	540 x 340 x 100 мм
3.ДРАВЕР:	540 x 340 x 100 мм
4.ДРАВЕР:	540 x 340 x 100 мм
5.ДРАВЕР:	540 x 340 x 190 мм

НЕТ

Пользователь может использовать перегородки, чтобы разделить эти ящики на 3-4-5-6-7-8-9 и 12 с помощью коэффициента

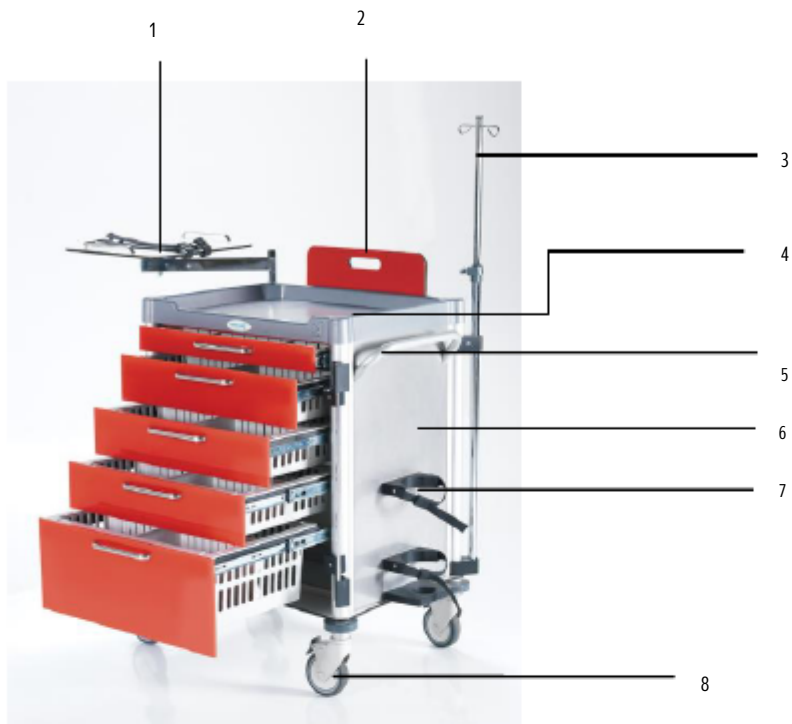

1 - Стол для дефибратора размером 420 x 420 мм

2 - Реанимационная доска размером 650 x 430 мм

3 - Фиксированная деталь 25 x 1,5 мм, регулируемая деталь 20 x 1,5 мм, кромкооблицовочный стержень для IV-го типа

4 - Столешница из АБС-пластика 720 x 550 мм

5 - Нажимной держатель

6 - Максимальное отверстие для подачи кислорода объемом 5 литров сбоку, изготовленное из АБС-пластика

7 - Передние ящики из оргстекла


8 - Первый ящик можно использовать как рабочий стол.

113 ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ ЛЕКАРСТВ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ



1. Ролики 125 мм
2. Мусорный бак
3. Полка для раздачи бутылок
4. Хранение лекарств
5. Столешница из АБС-пластика
6. Защитный Бампер
7. Тормозная Система

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 113

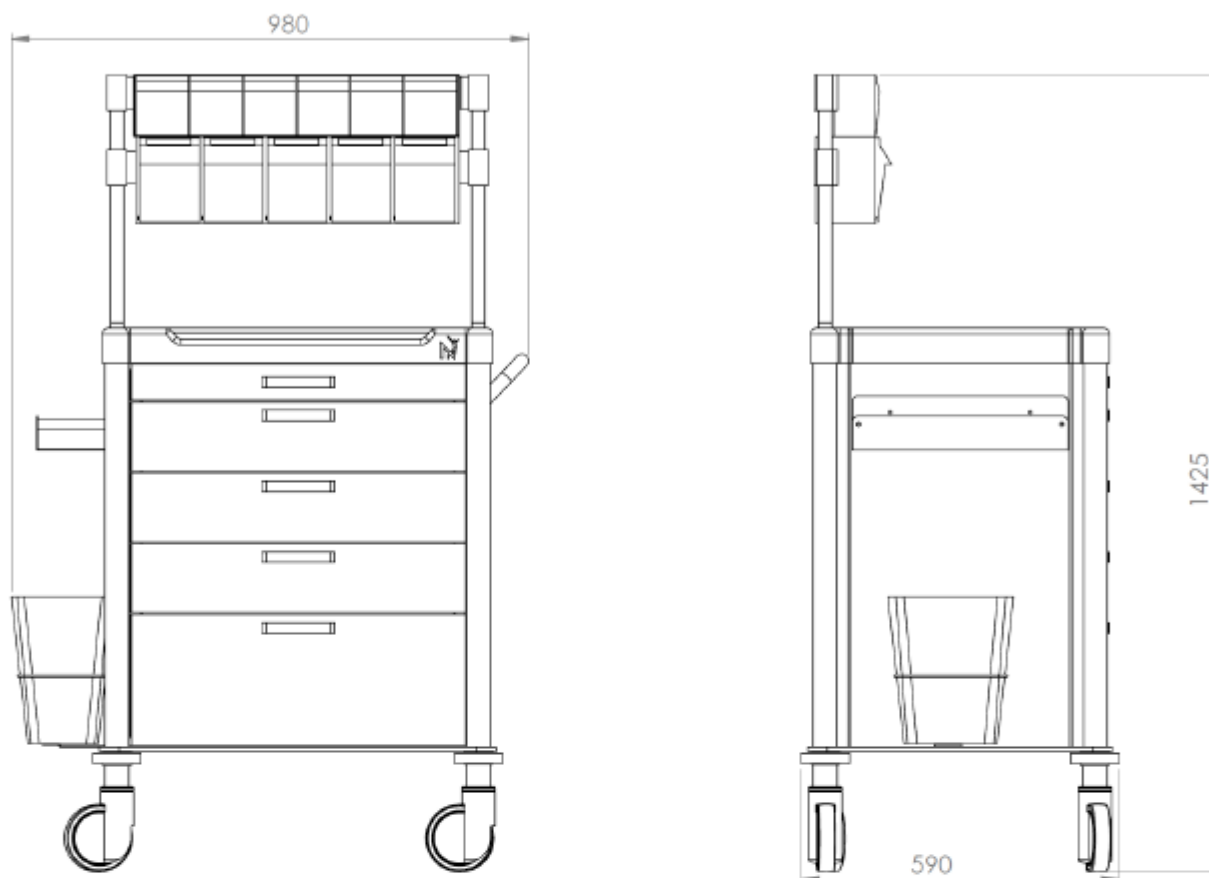

Тележки для медикаментов и неотложной помощи NITROCARE выходят на передний план благодаря удобной и надежной конструкции а) Верхняя поверхность тележки для медикаментов и неотложной помощи изготовлена из АБС-пластика толщиной 6 мм. компактный материал. Компактный материал - это вода, кислота и т.д. Максимальная прочность по отношению к материалам и удобство использования практикующим врачом. б) Шасси и материал корпуса тележки для медикаментов и неотложной помощи изготовлены из нержавеющей стали

Тележка для медикаментов и неотложной помощи имеет 5 выдвижных ящиков разного размера. Пользователь может использовать перегородки, чтобы разделить эти ящики на 3-4-5-6-7-8-9 и 12 с помощью коэффициента с) Между медицинской тележкой и тележкой скорой помощи установлены 4 двойных колеса, и машина фиксируется с помощью обоих этих колесиков для обеспечения более удобного и безопасного использования пользователем. г) В верхней части нашего изделия, имеются ящики для хранения антибактериальных препаратов, подходящие в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения

- е) Флакн с полкой, расположенный с левой стороны автомобиля пользователя с лекарствами и неотложной помощью. Это Может использоваться для настройки.
- ф) Мешок для мусора рядом с машиной для приема лекарств и оказания неотложной помощи обеспечивает удобство для пользователя.
- г) Встроенная тормозная система сбоку от тележки для оказания неотложной помощи позволяет закройте все ящики.



СИМВОЛЫ




Пожалуйста, прочтите руководство пользователя...

НТНМ 115 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- 1- Мусорное ведро
- 2- Полка для раздачи бутылок
- 3- Хранение лекарств в 12 коробках
- 4- Столешница из АБС-пластика
- 5- Система определения
местоположения Аварийной тележки
- 6- Тормозная
система
- 7- Ролики -125 мм
- 8- Защитный Бампер

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 115

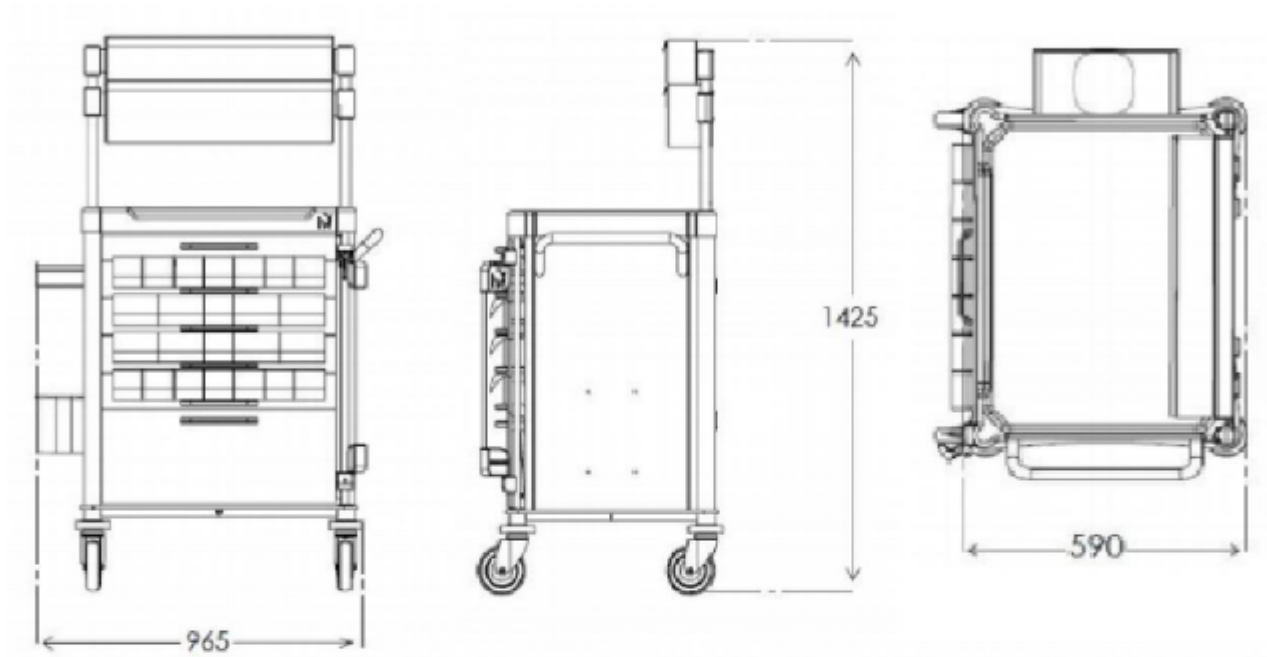

Верхняя поверхность тележки для медикаментов и неотложной помощи изготовлена из АБС-пластика толщиной 6 мм.

компактный материал. Компактным материалом является вода, кислота и т.д.

Максимальная прочность по отношению к материалам и удобство использования

практикующим врачом. Система блокировки тележки может блокировать все

выдвижные ящики. 6. Выдвижной ящик может быть разделен на секции с помощью специального

устройства. Верхний приставной столик изготовлен из МДФ и Абс-пластика.

6 драверов (1. Дравер можно использовать в качестве рабочего стола.) доступно 7 штук

в упаковках № 2 и 5 и 5 штук в упаковках № 3 и 4 устройств для хранения лекарств

каждое из этих устройств состоит из 4 отдельных секций.

Открытая полка для бутылок с этикетками с одной стороны, два ряда-ящики для хранения лекарств ага

доступны сверху, защитные бортики на колесиках для предотвращения ударов. 3

линии- за таблицей доступны ящики для хранения лекарств.

Защитные бортики на колесиках.

В задней части тележки для медикаментов имеются 3 направляющих.

125 мм 4 колесика

Мусорный бак


Тормозная система на двух колесиках с помощью ножки.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРЗИНЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВ NTHM 116
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



- 1- Двойные ролики диаметром 100 мм
- 2- Пищевое тело
- 3- Столешница из АБС-пластика
- 4- Система Определения
- местоположения Аварийной тележки 5- Защитный
- Бампер 6- Тормозная Система

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ NTHM 116

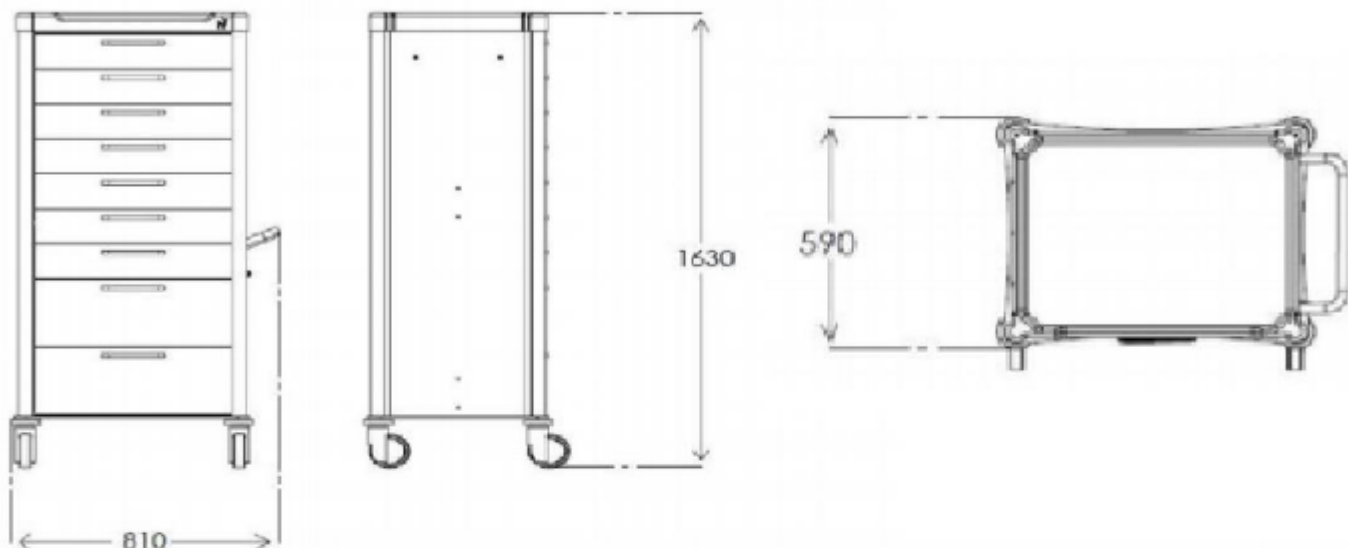

Конструкция корпуса изготовлена из нержавеющей стали, пластика и алюминия.

Доступна система блокировки тележки; все тележки могут запираться с помощью замка механизма.

Тележки высотой 100-200 мм могут быть разделены на 3-4-5-6-7-8-9-12 различных секций

Верхний боковой столик изготовлен из МДФ и АБС-материалов.

9 выдвижных ящиков. Верхние 7 выдвижных ящиков могут быть разделены на 3-4-5-6-7-8-9-12 различных секций. 8 и 9 тягачи имеют 4 секции.

Защитные бамперы на колесиках.

Тормозная система на двух колесиках с помощью ножки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Периоды технического обслуживания

6.1. Ежемесячное техническое обслуживание

Проверяйте все подвижные части на предмет коррозии.

6.2. Техническое обслуживание каждые 4

месяца Управляйте приводами Контролируйте

все резьбовые соединения

Управляйте подвижным механизмом кровати пациента.

Отрегулируйте винты на колесиках и при необходимости

затяните винты. 6.3. Техническое обслуживание каждые 12 месяцев

Общий контроль механических систем перемещения и пластиковых принадлежностей медицинских тележек.

6.4. Запасные части

Гарантия не распространяется на запасные части, требующиеся в связи с неправильным использованием.

Техническое обслуживание должно производиться только уполномоченным и обученным лицом. О любых проблемах сообщайте в техническую службу NITROCARE.

Требуются запасные части и

информация Техническая служба NITROCARE

teknikservis@nitrocare.com.tr

0542 845 23 05

6.5. Коррозия

Отрегулируйте винты на роликах и при необходимости затяните

винты. Отрегулируйте все механизмы блокировки. Замените

все изношенные принадлежности. Не используйте неподходящие

детали после замены изнашиваемых принадлежностей.

6.6. Ролики

Полностью очистите ролики.

Отрегулируйте соединительные винты и при необходимости замените их.

Перемещайте ролики и следите за их исправностью.

Движение вперед и назад.

Неограниченное движение. Управляйте

тормозной системой и при необходимости заменяйте ее.

6.7. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Проверьте принадлежности и убедитесь, что они функционируют должным образом, и при необходимости замените их.

Утилизация

Защита окружающей среды

Компания NITROCARE заботится об охране окружающей среды для своих потомков и добивается больших успехов в этом мнении.

Материалы этого продукта совместимы с окружающей средой. Не содержит опасных веществ.

Заказчик будет проинформирован об используемых символах и обозначениях.

При производстве используются переработанная сталь, электрические компоненты и деревянные детали. Изделия упакованы в коробки, пригодные для вторичной переработки.



Гарантия

Компания NITROCARE несет ответственность только за регулярное техническое обслуживание и надежность изделия. **При возникновении критической непоправимой проблемы во время технического обслуживания**

Прекратите использование кровати пациента.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца с даты покупки. Дефекты, возникшие в результате изготовления и установки, будут устранены бесплатно. Дефекты, возникшие в результате неправильного использования, не покрываются гарантией. Условия использования продукта указаны в стандартах.

Контакты

ФАБРИКА / СИВАС

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım 5.Cadde

No:48 - 50 SİVAS-TÜRKİYE **Telefon:** +90 0 346 218

12 91 - 92 - 93 **Faks:** +90 0 346 218 12 95

Электронная почта: info@ofisline.com.tr

ФАБРИКА / СИВАС

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:7

SİVAS-TÜRKİYE **Telefon:** +90 346 218 19 10 -

11 - 12 - 13 **Faks:** +90 346 218 19 14

Электронная почта: info@nitrocare.com.tr

ГРИБЫ / АНКАРА

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.1436 sok

No:1-37 Çukurambar/ANKARA-TÜRKİYE **Telefon:**+90

312 286 66 44 **Faks:**+90 312 286 86 67

Электронная почта:info@nitrocare.com.tr

İSTANBUL OFFICE / İSTANBUL

Barbaros Mah. Halk Cad No:15-17

Ataşehir-İSTANBUL TÜRKİYE **Telefon:**+90 216

317 56 50-51 **Faks:**+90 216 317 56 62

Электронная почта:info@nitrocare.com.tr

ГРИБЫ / ИЗМИР

9 Eylül Mah. Akçay Cad.No:159 Gaziemir

İZMİR-TÜRKİYE **Telefon:**+90 232 220 13 14

Faks:+90 232 220 13 15

Электронная почта:info@nitrocare.com .tp

